

2023年3月吉日

お客様各位

株式会社ワイエムシィ

価格改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般下記製品の調達価格が高騰したことに伴い、誠に遺憾ではございますが、販売価格を改定させていただくこととなりました。

事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：フロー反応システム・周辺機器 アクセサリー・パーツ

製品名	製品番号	新価格（円）
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（500 µL）	YMC-P-1019	20,000
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（2.5 mL）	YMC-P-1006	20,000
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（10 mL）	YMC-P-1008	33,900
KeyChemシリーズ用コネクタ	YMC-P-0005	2,500

※価格には消費税は含みません。

2. 実施時期：2023年4月1日 受注分から

以上

※本件に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記までご連絡願います。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社ワイエムシィ 営業本部 TEL：075-342-4503 FAX：075-342-4530
- Web サイト お問い合わせフォーム <https://www.ymc.co.jp/inquiry/form/>

お客様各位

株式会社ワイエムシィ

カタログ掲載製品 価格改定および販売終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般下記製品の調達価格が高騰したことに伴い、誠に遺憾ではございますが、販売価格を改定させていただくこととなりました。また、販売終了となる製品がございますので、併せてご案内いたします。

事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

【価格改定】

YSP シリーズ シリンジポンプ

型番	タイプ	旧価格 (円)	新価格 (円)
YSP-101	標準タイプ	95,000	114,000
YSP-201	高性能タイプ	150,000	180,000
YSP-301	高性能高圧タイプ	210,000	225,000
YSP-202	2本シリンジ搭載タイプ	190,000	210,000

KeyChem シリーズ アクセサリー

型番	製品名	旧価格 (円)	新価格 (円)
YMC-P-0013	背圧レギュレータ 背圧 5 psi	24,000	40,000
YMC-P-0014	背圧レギュレータ 背圧 20 psi	24,000	40,000
YMC-P-0015	背圧レギュレータ 背圧 40 psi	24,000	40,000
YMC-P-0052	インラインチェックバルブ	25,000	45,000

※価格には消費税は含まれていません。

【販売終了】

型番	製品名
YMC-P-0067	コネクタ 1/8 インチ PEEK 製・M6HN
YMC-P-0068	フェラル 1/8 インチ PTFE 製・GF

※代替品につきましてはお問い合わせください。

2. 実施時期 : 2022年10月1日 受注分から

以上

※本件に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記までご連絡願います。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社ワイエムシィ 営業本部 TEL : 075-342-4503 FAX : 075-342-4530
- Web サイト お問い合わせフォーム <https://www.ymc.co.jp/inquiry/form/>

2021年12月吉日

お客様各位

株式会社ワイエムシィ

価格改定および販売終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般下記製品の調達価格が高騰したことに伴い、誠に遺憾ではございますが、販売価格を改定させていただくこととなりました。また、販売終了となる製品がございますので、併せてご案内いたします。

事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：フロー反応システム・周辺機器 シリンジポンプ／アクセサリ・パーツ

【価格改定】

製品名	製品番号	旧価格（円）	新価格（円）
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（1 mL）	YMC-P-1005	14,000	18,000
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（2.5 mL）	YMC-P-1006	15,000	18,000
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（5 mL）	YMC-P-1007	14,000	21,100
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（10 mL）	YMC-P-1008	17,000	24,200
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（25 mL）	YMC-P-1009	55,000	94,500
ハミルトン製ガスタイトシリンジ（50 mL）	YMC-P-1015	60,000	113,700

※価格には消費税を含みません。

【販売終了】

製品名	製品番号
KeyChem-Lumino用中圧水銀ランプユニット	YMC-P-0066
フラクションコレクタ RETRIEVER 500	FC-RR-500
KeyChem用ミキサ Spica (Static型ミキサ)／ガラス製	KC-M-S-G

2. 実施時期

2022年1月1日 受注分から

以上

※本件に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの代理店または下記までご連絡願います。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社ワイエムシィ 営業本部 TEL：075-342-4503 FAX：075-342-4530
- Web サイト お問い合わせフォーム <https://www.ymc.co.jp/inquiry/form/>


フロー反応システム

KeyChemシリーズ



3タイプのフロー反応システム

異相系反応システム

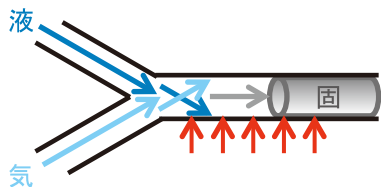


- マイクロミキサによる高効率な液-液、気-液混合
- 触媒カラムの利用による安全・高効率な反応
- 触媒の濾別不要
- 連続送液システムにより合成量の調整が可能

1台で固・液・気相間の各反応を実施可能
KeyChem-Integral



液-液反応システム

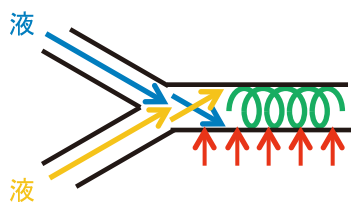

- 高速攪拌により反応時間が短縮
- 精密な温度制御により過度な加熱冷却が不要
- 流量操作のみで精密な滞留時間制御が可能

手軽にフロー反応を実施

KeyChem-Basic




PC制御によるフロー反応システム

KeyChem-L/LP



光反応システム

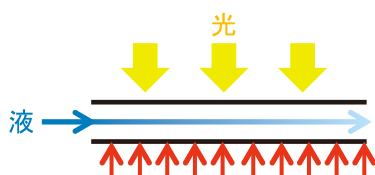

- 優れた光照射効率
- 煩雑な設置が不要
- 光照射時間を精密に制御可能
- 温度制御が容易

優れた光照射効率で光反応の可能性を拡大

KeyChem-Lumino



KeyChem-Integral

特長

- 1台で気-液、液-液、固-液、固-液-気の各反応を実施可能
- 多孔質テフロン® (AF2400)を使用した気-液反应用コイルリアクタを搭載可能
- 流量、温度、圧力を制御可能
- 各ユニットのセット数および組み合わせを自由に選択可能




コイルリアクタユニット(プレヒートユニット)


- 気-液反应用フローリアクタを設置可能
- 液-液、気-液、固-液-気反应用のプレヒート部としても使用可能
- プレヒート、滞留時間ユニットとして併用可能
- 手動、PCにて制御可能



気-液反应用フローリアクタの構造

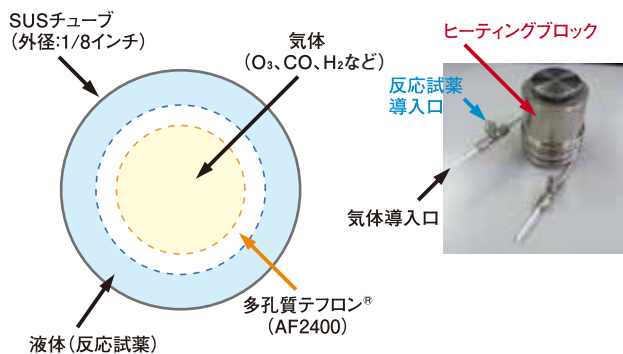

気-液反应用フローリアクタ機構

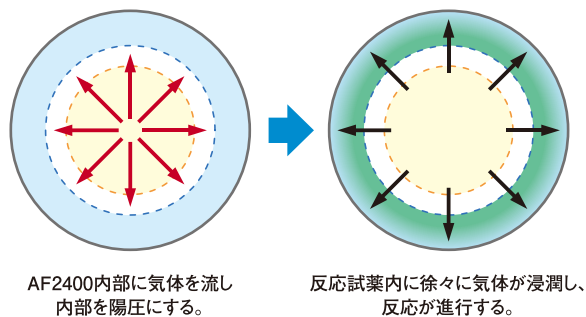

カラムリアクタユニット

- 固-液-気、固-液反应用のカラムリアクタを設置可能
- 各種触媒を充填した金属製またはガラス製のカラムを使用
- 背圧レギュレータを搭載しているため、圧力を手動で調節可能
- 手動、PCにて温度制御可能



ミキシングブロックユニット

- 液-液反应用リアクタによるマイクロ空間での高速混合
- ミキサ3種類、RTU(滞留時間ユニット)2種類を設置可能
- 手動、PCにて温度制御可能



マスフローコントロールユニット

- 固-液-気、気-液反应用の気体流量を制御可能
- 流量はSCCM (≒mL/min) 単位で制御
- 各種ガスに対応可能(腐食性ガス除く)
- 手動、PCにて制御可能



送液ポンプユニット(デュアルプランジャーポンプ)

- 液-液、固-液-気、気-液反应用の液体流量を制御可能
- 高精度・高耐圧で脈流の少ないデュアルプランジャーポンプ
- コンパクト設計
- 手動、PCにて制御可能



コントロールユニット

- PC制御時に使用
- 温度や圧力などの制御・記録・モニタリングが可能
- 4ヶ所での温度測定が可能



KeyChem-Basic




特長


- 手軽に始められるフロー反応導入キット
- フレキシブルに構成パーツの組み換えが可能

- 希望の反応形式、ご予算に応じた各パーツの選択が可能です。

1段反応

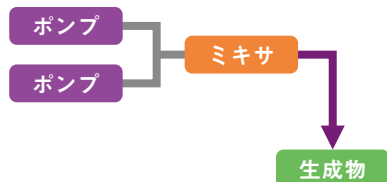

2段反応

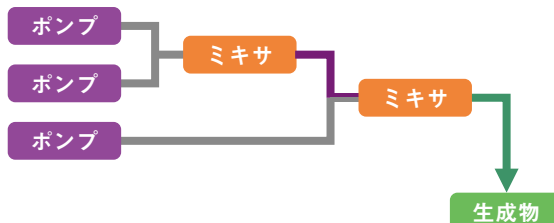

3段反応

⋮


送液ポンプ

シリンジポンプまたは連続送液が可能なプランジャーポンプが選択できます。必要に応じてPC制御も可能です。



ミキサ

3種類の流路形状(Y字型・Helix型・Static型)と3種類の材質(SUS・ガラス・PTFE)からご希望の組み合わせを選択できます。

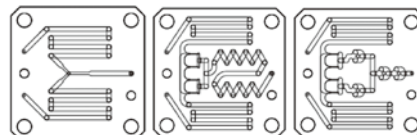

温調方式

オイルバスやウォーターバスを利用して温度コントロールを行うハウジングか、オイルフリーで温度調節が可能な温調装置が選択できます。



KeyChem-L/KeyChem-LP

特長

- PC制御のフロー反応により温度・圧力などのモニタリング・保存が可能
- 汎用性が高く、多段反応も可能
- シリンジポンプを使用するKeyChem-Lと、プランジャーポンプを使用するKeyChem-LPをラインナップ



KeyChem-L



KeyChem-LP

送液ポンプ

● シリンジポンプ (KeyChem-L)

脈流のない安定した送液が可能です。シリンジユニット部が脱着できるため、シリンジ本数の変更や1-5方バルブと1-2方バルブのセットアップが可能です。2段反応や3段反応、反応性の高い試薬の反応後の洗浄など、バルブの組み合わせで様々な反応に対応できます。



● プランジャーポンプ (KeyChem-LP)

連続送液が可能です。ロータリーピストンポンプを採用しているため、長時間にわたり正確な送液を行うことができます。また、懸濁液などの固体を含む溶液の送液が可能です。



温調装置

ペルチェ素子を用いた低温タイプと、伝熱ヒーターを用いた高温タイプがあります。熱冷媒が不要であり、オイルフリーで安全・簡便に加熱・冷却が可能です。



ミキサ

マイクロ空間での高速混合が可能で、3種類の流路形状(Y字型・Helix型・Static型)、3種類の材質(SUS・PTFE・ガラス)からお選びいただけます。



フラクションコレクタ

KeyChem-L/LPともにフラクションコレクタの搭載が可能です。温度・圧力だけでなく、フラクションの切替もPCで制御できます。



KeyChem-Lumino


特長

- 優れた光照射効率
- 煩雑な装置の設定が不要で手軽に光反応を実施
- 温度コントロールが容易
- 目的に合わせて構成パーツを選択可能




光源

LED (365 nm)、中圧水銀ランプ (240-600 nm) の2種類があります。光が外に漏れない設計の専用リアクタハウジングに取り付けます。

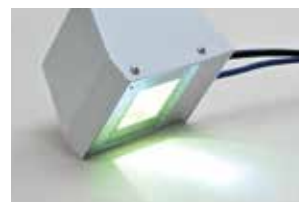

リアクタ

マイクロ流路により光が流路全体まで届き、反応液にムラなく光を照射できます。分解洗浄が可能なSUSタイプや接液部分がすべてガラスのタイプなど、反应用途での使い分けが可能です。

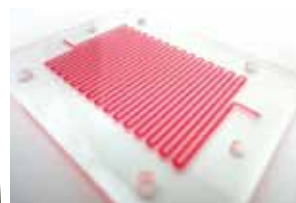

送液ポンプ

流速を設定することにより、秒スケールで照射時間を制御できます。シリンジポンプとプランジャーポンプから選択が可能です。







温調装置

ペルチェ素子を用いた低温タイプと、伝熱ヒーターを用いた高温タイプがあります。熱冷媒が不要であり、オイルフリーで安全・簡便に加熱・冷却が可能です。



仕様 / ラインナップ

KeyChem-Integral (ミキサ・RTU、デュアルプランジャーポンプについては、KeyChem-Basicの仕様をご覧ください。)

コイルリアクタユニット(プレヒートユニット)								
型番	タイプ	温調方式	温調範囲	設定単位	電源	外寸(W×D×H)*1	重量	
	KI-CRUL	低温タイプ	ペルチェ方式	5~80℃	1℃	AC 100~240 V、 50/60 Hz、300 W	250×225×175 mm	約4 kg
	KI-CRUH	高温タイプ	ヒーター方式	室温+10~200℃				
カラムリアクタユニット*2								
型番	温調方式		温調範囲	設置カラムサイズ	電源	外寸(W×D×H)*1	重量	
	熱板式 (ヒーター方式)		室温+10~200℃ (設定単位:1℃)	φ4.6×30 mm~ φ10.0×150 mm	AC 100~240 V、 50/60 Hz、300 W	250×225×347 mm	約7 kg	
ミキシングブロックユニット								
型番	タイプ	温調方式	温調範囲	設置可能リアクタ	電源	外寸(W×D×H)*1	重量	
	KI-MUL	低温タイプ	ペルチェ方式	5~80℃	ミキサ3種 RTU2種	AC 100~240 V、 50/60 Hz、300 W	250×225×175 mm	約4 kg
	KI-MUH	高温タイプ	ヒーター方式	室温+10~200℃				
マスフローコントロールユニット								
型番	耐圧	流量範囲	対応ガス	接ガス部材質	電源	外寸(W×D×H)*1	重量	
	KI-MFCL	0.98 MPa	1~100 SCCM (設定単位:1 SCCM)	各種*3 (注文時指定)	SUS316、FKM	AC 100~240 V、 50/60 Hz、80 W	140×186×165 mm	約3 kg
	KI-MFCH	10 MPa						

*1 突起物を除く *2 背圧レギュレータ付き(接液部:カルレツソ、PEEK 調整範囲:0~1.72 MPa) *3 腐食性ガスを除く
※価格はお問い合わせください。

KeyChem-Basic

ミキサ・RTU(滞留時間ユニット) (KeyChem-Integral、KeyChem-Basic、KeyChem-L/LP共通)

Hadar (Y字型ミキサ)				Sirius (RTU)				
型番	材質	価格(円)		型番	材質	容量(mL)	価格(円)	
 ガラス製	KC-M-Y-SUS	SUS316	38,000		R006-50-S6	SUS316	1.5	38,000
	KC-M-Y-GL	ガラス	59,000		R005-50-S6		3	40,000
	KC-M-Y-P	PTFE	15,000		R004-50-S6		4.5	42,000
Deneb (Helix型ミキサ)				Rigel (Y字型ミキサ+RTU)				
型番	材質	価格(円)		型番	材質	容量(mL)	価格(円)	
 ガラス製	KC-M-H-SUS	SUS316	54,000		KC-MR4.5-Y-SUS	SUS316	4.5	145,000
	KC-M-H-G	ガラス	250,000					
	KC-M-H-P	PTFE	20,000					
Spica (Static型ミキサ)								
型番	材質	価格(円)						
 ガラス製	KC-M-S-SUS	SUS316	54,000					
	KC-M-S-G	ガラス	お問合わせ					
	KC-M-S-P	PTFE	20,000					

ハウジング

ミキサハウジング				滞留時間ユニットハウジング			
型番	材質	価格(円)		型番	材質	価格(円)	
	YMC-P-0030-01	アルミ	12,000		YMC-P-0032	アルミ	22,000
	ミキサハウジング(内部観察用)						
型番	材質	価格(円)					
	YMC-P-0030-02	アルミ	15,000				

KeyChem-Basic

送液ポンプ

デュアルプランジャーポンプ (KeyChem-Integral、KeyChem-Basic、KeyChem-Lumino共通)						
型番	接液部材質	圧力センサー	流量範囲 (mL/min)	耐圧 (MPa)	価格 (円)	
YMCU-22-110P	PEEK	○	0.001~9.999	20	564,000	
YMCU-22-110S	SUS			35	620,000	
YMCK-24-33P	PEEK		0.1~50.0	5	516,000	
YMCU-22-410S	SUS		0.01~99.99	5	720,000	

YSPシリーズシリンジポンプ (KeyChem-Basic、KeyChem-Lumino共通)				
型番	タイプ	最小流量*1	最大流量*2	価格 (円)
YSP-101	標準タイプ	0.012 μL/min	31.5 mL/min	95,000
YSP-201	高性能タイプ		42.57 mL/min	150,000
YSP-301	高性能高圧タイプ	0.023 μL/min	153.3 mL/min	210,000
YSP-202	2本シリンジ搭載タイプ		76.32 mL/min*3	190,000

*1 ハミルトン製ガスタイトシリンジ1 mL使用時 *2 ハミルトン製ガスタイトシリンジ50 mL使用時 *3 ハミルトン製ガスタイトシリンジ25 mL使用時

YSPシリーズ用PC制御ソフト		価格 (円)
型番	YSP-PC-001	50,000~

温調装置

独立型Thermo Stage (KeyChem-Basic、KeyChem-Lumino共通*1)					
型番	タイプ	温調方式	温調範囲	外寸 (W×D×H)	価格 (円)
TS-C-M	低温タイプ・ミキサ	ペルチェ方式	-15~80℃*2 (室温25℃時)	120×230×220 mm	480,000
TS-C-R	低温タイプ・RTU				580,000
TS-H-M	高温タイプ・ミキサ	ヒーター方式	室温~150℃	120×230×255 mm	540,000
TS-H-R	高温タイプ・RTU				640,000

*1 KeyChem-LuminoはRTUタイプ (TS-C-R、TS-H-R) のみとなります。
*2 KeyChem-Luminoでの光源使用時は10~70℃です。

構成例

スタンダードシステム

価格 306,600円~



マイクロミキサによる効果を試したい方に

構成パーツ

製品名	型番	個数	単価 (円)	価格 (円)
YSPシリーズ シリンジポンプ	YSP-101	2	95,000	190,000
コネクタ1/16インチ (10個入り) 樹脂製	YMC-P-0006	1	11,000	11,000
シリンジアダプタ (めすタイプ) (5個入り)	YMC-P-0080	1	8,000	8,000
フェラル1/16インチ (10個入り) PTFE製・GF	YMC-P-0012	1	15,000	15,000
Deneb (Helix型ミキサ・SUS製)	KC-M-H-SUS	1	54,000	54,000
ミキサハウジング	YMC-P-0030-01	1	12,000	12,000
PTFE製チューブ (内径 0.5 mm・外径 1/16インチ・長さ 10 m)	YMC-P-0025	1	10,000	10,000
コネクタ1/16インチ PEEK製・M6HN	YMC-P-0002	3	2,200	6,600

2段反応システム

価格 474,200円~



フローマイクロ効果が実感できる2段反応を試したい方に



構成パーツ

製品名	型番	個数	単価 (円)	価格 (円)
YSPシリーズ シリンジポンプ	YSP-101	3	95,000	285,000
コネクタ1/16インチ (10個入り) 樹脂製	YMC-P-0006	1	11,000	11,000
シリンジアダプタ (めすタイプ) (5個入り)	YMC-P-0080	1	8,000	8,000
フェラル1/16インチ (10個入り) PTFE製・GF	YMC-P-0012	1	15,000	15,000
Deneb (Helix型ミキサ・SUS製)	KC-M-H-SUS	2	54,000	108,000
ミキサハウジング	YMC-P-0030-01	2	12,000	24,000
PTFE製チューブ (内径 0.5 mm・外径 1/16インチ・長さ 10 m)	YMC-P-0025	1	10,000	10,000
コネクタ1/16インチ PEEK製・M6HN	YMC-P-0002	6	2,200	13,200

仕様 / ラインナップ

KeyChem-L/LP (ミキサ・RTUについては、KeyChem-Basicの仕様をご覧ください。)


送液ポンプ

	MR2シリンジポンプ/MR2シリンジポンプHT (KeyChem-L)					
	型番	バルブ組み合わせ	流量範囲	電源		
	MRSY04-40	1-5方バルブ×4	0.7 μL/min~55 mL/min (推奨:10 μL/min~10 mL/min)	AC 100~240 V、 50/60 Hz、300 W		
	MRSY04-22	1-5方バルブ×2 1-2方バルブ×2				
MRSYH02-20	1-5方バルブ×2					
	プランジャーポンプ (KeyChem-LP)					
	型番	送液方式	流量範囲	送液精度	電源	外寸 (W×D×H)
	MRSYSTEM-KLP	ロータリー ピストン	0.1 mL/min~25 mL/min	±3%以内	AC 100~240 V、 50/60 Hz、300 W	150×180×186 mm

温調装置

	サーモステージ (2基連結タイプ)						
	型番	タイプ	温調方式	温調範囲	温調精度	電源	外寸 (W×D×H)
	TS2-C	低温タイプ	ペルチェ方式	-15~80℃ (室温25℃時)	±1℃	AC 100~240 V、 50/60 Hz、400 W	270×230×220 mm
	TS2-H	高温タイプ	ヒーター方式	室温~150℃			270×230×255 mm



フラクションコレクタ

	RETRIEVER®500		
	型番	電源	外寸 (W×D×H)
	FC-RR-500	AC 100 V、 50/60 Hz	210×290×180 mm

※価格はお問い合わせください。

KeyChem-Lumino (送液ポンプ、温調装置については、KeyChem-Basicの仕様をご覧ください。)

光源

	LED光源ユニット					
	型番	ピーク波長	寿命	光出力	外寸 (W×D×H)	価格 (円)
	YMC-P-0074	365 nm	1000時間	最大290 mWまで可変	発光部:84×110×55 mm 電源部:50×150×161 mm	950,000
	中圧水銀ランプユニット					
	型番	ピーク波長	寿命	光出力	外寸 (W×D×H)	価格 (円)
	YMC-P-0066	240~600 nm	4000時間	430 mW/cm ² (254 nm)	発光部:92×121×100 mm 電源部:60×270×100 mm	1,200,000

リアクタ

	リアクタ				リアクタハウジング		
	材質	流路深さ (mm)	価格 (円)		型番	材質	価格 (円)
	ガラス	0.5	お問い合わせ		YMC-P-0065	SUS	300,000
	SUS	1.0	100,000				
PTFE	75,000						
	カバーガラス						
	型番	材質	価格 (円)				
	YMC-P-LU08	ガラス	30,000				

*型番、その他の流路深さについてはお問い合わせください。

アクセサリ

シリンジ

ディスポーザブルシリンジ				
型番	容量	入数(本)	価格(円)	
YMC-P-1001	2 mL	100	5,000	
YMC-P-1002	5 mL	100	8,000	
YMC-P-1003	10 mL	100	10,000	
YMC-P-1004	20 mL	100	13,000	
YMC-P-1021	30 mL	50	16,000	
YMC-P-1022	50 mL	30	13,000	
ハミルトン製ガスタイトシリンジ				
型番	容量	価格(円)		
YMC-P-1019	500 μ L	12,000		
YMC-P-1005	1 mL	14,000		
YMC-P-1006	2.5 mL	15,000		
YMC-P-1007	5 mL	14,000		
YMC-P-1008	10 mL	17,000		
YMC-P-1009	25 mL*	55,000		
YMC-P-1015	50 mL*	60,000		
*YSPシリーズシリンジポンプで初めてご使用になる際は、YSPシリーズシリンジポンプ用アタッチメント(YMC-P-0077)をお買い求めください。				
ワイエムシイ製高耐圧シリンジ25 mL				
型番	容量	価格(円)		
YMC-P-1014	25 mL	90,000		

ディスポーザブルシリンジ取付キット(MR2ポンプ用)			
型番	シリンジ容量	価格(円)	
YMC-P-0041	5 mL	8,000	
YMC-P-0042	10 mL	8,000	
YMC-P-0043	20 mL	8,000	
ハミルトン製シリンジ取付キット(MR2ポンプ用)			
型番	シリンジ容量	価格(円)	
YMC-P-0039	25 mL	10,000	
圧力計付きリザーバユニット(MR2ポンプ用)			
型番	価格(円)		
YMC-P-0046	お問い合わせ		
YSPシリーズシリンジポンプ用アタッチメント			
型番	価格(円)		
YMC-P-0077	5,000		

レギュレータ・フィルタ

背圧レギュレータ				
型番	材質	背圧(psi)	価格(円)	
YMC-P-0013	PEEK、テフゼル、 金メッキSUSなど	5	24,000	
YMC-P-0014		20	24,000	
YMC-P-0015		40	24,000	
インラインチェックバルブ				
型番	材質	価格(円)		
YMC-P-0052	PEEK、テフゼル、 金メッキSUSなど	25,000		

インラインフィルタ(フィルタ10枚付)			
型番	材質	価格(円)	
YMC-P-0016	PTFE	19,000	
サクシオンフィルタ			
型番	材質	価格(円)	
YMC-P-0062	PEEK、SUS、 PE、ETFEなど	23,000	

チューブ

PTFE製チューブ(長さ10 m)				
型番	内径(mm)	外径(インチ)	価格(円)	
YMC-P-0024	0.25	1/16	10,000	
YMC-P-0025	0.5	1/16	10,000	
YMC-P-0026	0.75	1/16	10,000	
YMC-P-0027	1	1/16	10,000	
YMC-P-0075	1.6	1/8	15,000	
YMC-P-0076	2.4	1/8	15,000	
SUS製チューブ(長さ10 m)				
型番	内径(mm)	外径(インチ)	価格(円)	
YMC-P-0028	0.5	1/16	14,000	
YMC-P-0029	1	1/16	14,000	
プレヒートパーツ				
型番	材質	容量(μ L)	価格(円)	
YMC-P-0059	SUS	955	20,000	

チュービングクリップ				
型番	材質	入数(個)	価格(円)	
YMC-P-0072	PP	5	5,000	
ユニオン1/16インチ				
型番	材質	価格(円)		
YMC-P-0071	SUS	5,000		
1/16インチ密栓(MR2ポンプ用)				
型番	材質	入数(個)	価格(円)	
YMC-P-0064	PEEK	5	5,000	

T字リアクタ

PEEK製T字リアクタ				
型番	材質	内径(mm)	価格(円)	
YMC-P-0021	PEEK	0.3	6,000	
YMC-P-0022		0.5	6,000	
YMC-P-0023		1.0	6,000	

SUS製T字リアクタ				
型番	材質	内径(mm)	価格(円)	
YMC-P-0058	SUS316	0.3	8,000	
YMC-P-0019		0.5	6,000	
YMC-P-0020		1.0	6,000	

アクセサリ

コネクタ

コネクタ1/16インチ SUS製	型番	材質	入数(個)	価格(円)
	YMC-P-0001	SUS316	10	7,000
コネクタ1/16インチ PEEK製・M6HN	型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0002	PEEK	1	2,200	
コネクタ1/16インチ 樹脂製	型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0006	ETFE	10	11,000	
コネクタ1/8インチ 樹脂製	型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0078	ETFE	10	10,000	
コネクタ1/8インチ PEEK製・M6HN	型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0067	PEEK	1	2,000	
コネクタ1/8インチ PEEK製・FSF	型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0070	PEEK	10	7,000	

KeyChemシリーズ用コネクタ			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0005	PEEK	1	1,500
ハウジングコネクタ(SUSチューブ用)			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0057	SUS	1	14,000
ルアーアダプタ(おすタイプ)			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0008	ETFE	1	2,500
ルアーロック型コネクタ			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0003-01	PCTFE、PTFE	1	4,500
シリンジアダプタ(めすタイプ)			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0080	ETFE	5	8,000
EASYFIT10φ			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0009	PEEK	10	10,000

フェラル

フェラル1/16インチ 樹脂製			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0010	PTFE	10	5,000
フェラル1/16インチ SUS製			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0011	SUS316	10	7,000
フェラル1/16インチ SFL			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0060	PEEK、SUS316	10	10,000

フェラル1/16インチ PTFE製・GF			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0012	PTFE、SUS316	10	15,000
フェラル1/8インチ PTFE製・GF			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0068	PTFE、SUS316	10	15,000
フェラル1/8インチ ETFE製・FSF			
型番	材質	入数(個)	価格(円)
YMC-P-0069	ETFE	10	6,000

※価格には消費税を含みません。
この冊子に記載の情報は、2019年5月現在の情報です。内容に関しては予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書を熟読のうえ指示に従ってください。

YMC 株式会社ワイエムシイ

お問い合わせ先: 営業本部

京都 / 〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル4F
TEL. (075) 342-4503 FAX. (075) 342-4530

東京 / 〒108-0014 東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田6F
TEL. (03) 5439-9790 FAX. (03) 5439-9791

URL <http://www.ymc.co.jp>

販売店